


Zwangerschapstest Ultravroeg

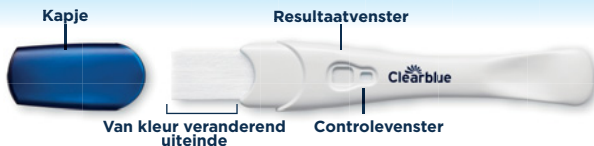

Voor zelf testen. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u een test uitvoert.

Test vanaf **6 dagen** voor uw gemiste menstruatie!

Gebruik de eerste urine van de dag als u vroeg test. Anders kunt u op elk moment van de dag testen.

Drink niet te veel voordat u de test uitvoert.

Lees de uitslag binnen **10 minuten**.

1 De test uitvoeren

Verwijder de verpakingsfolie, verwijder het kapje en gebruik direct. Plaats het van kleur veranderende uiteinde:

BELANGRIJK: dompel het uiteinde volledig onder zoals afgebeeld.

5 seconden in uw urinestraal

of

20 seconden in een opgevangen urinemonster

BELANGRIJK: het van kleur veranderende uiteinde wordt snel roze, wat aangeeft dat de urine wordt geabsorbeerd. **Houd de tijd bij zodra u ziet dat het van kleur veranderende uiteinde roze wordt.** Plaats het kapje terug en leg het teststaafje plat neer. Raadpleeg 'Testfouten' als het uiteinde niet helemaal roze kleurt.

2 Wachten

3 minuten

In het controlevenster kan snel een lijn verschijnen, maar u moet **3 VOLLEDIGE MINUTEN WACHTEN** voordat u de uitslag afleest. Raadpleeg 'Testfouten' als er geen blauwe lijnen verschijnen.

3 Resultaten

Zwanger - raadpleeg uw arts als uw uitslag 'Zwanger' is.

Afbeelding A



Afbeelding B



Afbeelding C



Resultaatvenster Controlevenster

Niet Zwanger
(zie vraag 2).



Als u nog steeds niet zeker bent van de uitslag, gaat u naar vraag 6.

ALS U TWEE LIJNEN ZIET, BENT U ZWANGER. HET MAAKT NIET UIT OF DE LIJNEN LICHTER OF DONKERDER ZIJN. Uw uitslag is alleen geldig als er een blauwe lijn zichtbaar is in het controlevenster. Zie 'Testfouten' als dit niet het geval is. **BELANGRIJK!** Lees uw uitslag af binnen **10 minuten** na het uitvoeren van de test. Wijzigingen die zich daarna voordoen, moeten worden genegeerd.

Veelgestelde vragen

1 Volgens de test ben ik zwanger. Wat moet ik doen?

Maak een afspraak met uw huisarts. Hij of zij kan u adviseren over de stappen die u moet ondernemen. Het is mogelijk dat u een positieve uitslag krijgt en later ontdekt dat u niet meer zwanger bent (zie vraag 7).

2 Volgens de test ben ik niet zwanger. Wat betekent dit?

Mogelijk bent u niet zwanger of is de hoeveelheid zwangerschapshormoon te laag om te detecteren. Test over drie dagen opnieuw. Als deze test opnieuw de uitslag 'Niet zwanger' geeft en uw menstruatie is nog steeds niet begonnen, neemt u contact op met uw huisarts.

3 Hoe vroeg kan ik testen?

Deze test kan vanaf 6 dagen voor uw gemiste menstruatie worden gebruikt (5 dagen voordat uw menstruatie zou moeten beginnen). Omdat de hormoonniveaus echter per vrouw verschillen en in het begin van de zwangerschap erg laag kunnen zijn, is het mogelijk dat u zwanger bent, maar toch een negatieve uitslag krijgt. In de onderstaande tabel wordt het percentage weergegeven van zwangerschappen die bij laboratoriumtesten werden gedetecteerd met urinemonsters van een vroege zwangerschap:

Dagen voor uw gemiste menstruatie	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Gedetecteerde zwangerschappen	>99%	>99%	>99%	>99%	96%	79%

4 Hoe werkt Clearblue?

De test detecteert het zwangerschapshormoon hCG (humaan choriongonadotrofine) in urine. De testgevoeligheid bedraagt 10 mIU/ml. De test is bij laboratoriumtesten meer dan 99% nauwkeurig vanaf de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen.

5 Kunnen medicijnen of medische aandoeningen de uitslag beïnvloeden?

Lees altijd eerst de bijsluiter van uw medicijnen voordat u een test uitvoert. Onderecht positieve uitslagen kunnen worden veroorzaakt door medicatie die hCG bevat en door bepaalde zeldzame medische aandoeningen. Een buitenbaarmoederlijke of recente zwangerschap (zelfs als de zwangerschap niet is voldragen) kan misleidende uitslagen opleveren. Als u (bijna) in de menopauze bent, kunt u ook een onterechte uitslag 'Zwanger' krijgen terwijl u niet zwanger bent.

De test zou **NIEET** moeten worden beïnvloed door hormoonbehandelingen met clomifencitraat, reguliere pijnstillers, alcohol, antibiotica of de anticonceptiepill. Als u een onverwachte uitslag krijgt, dient u deze te bespreken met uw huisarts.

6 Wat als ik twijfel over mijn uitslag?

Als u binnen 10 minuten na het testen twee blauwe lijnen ziet, is de uitslag 'Zwanger'. Het maakt niet uit hoe licht of donker de lijnen zijn.

Uitslag 'Zwanger'

Afbeelding A De kans hierop is groter wanneer u test voordat u uw menstruatie verwacht, wanneer uw hCG-concentratie relatief laag kan zijn.

Afbeelding B Dit kan zichtbaar zijn als u test rond de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen, aangezien de hCG-concentratie dan relatief laag kan zijn.

Afbeelding C Dit kan zichtbaar zijn als u enkele dagen na het uitblijven van uw menstruatie test, wanneer de hCG-concentratie hoger is.

Als u nog steeds niet zeker bent van de uitslag, wacht dan ten minste 3 dagen voordat u opnieuw een test uitvoert. Volg de aanwijzingen nauwkeurig op.

7 Ik kreeg eerder de uitslag 'Zwanger', maar ik heb opnieuw getest en ik krijg nu een negatieve uitslag, of mijn menstruatie is begonnen. Wat betekent dit?

Het is mogelijk dat u een positieve uitslag krijgt en later ontdekt dat u niet meer zwanger bent. Dit heet 'vroeg zwangerschapsverlies'. Het is helaas niet ongewoon en komt voor bij 1 op de 4 zwangerschappen. De meeste vrouwen kunnen daarna weer zwanger worden en een gezonde zwangerschap doorlopen.

8 Is er iets wat ik moet doen als ik van plan ben zwanger te worden?

Het is een goed idee om met uw arts te praten voordat u probeert zwanger te worden. Veel dokters zullen u adviseren foliumzuur of prenatale vitaminesupplementen te nemen, alcohol te vermijden, te stoppen met roken en te proberen een gezond gewicht te behouden. U kunt ook overwegen een ovulatietest te gebruiken om uw meest vruchtbare dagen te bepalen. Clearblue biedt een breed scala aan mogelijkheden om u te helpen uw kansen om zwanger te raken te maximaliseren.

! Testfouten

Het van kleur veranderende uiteinde wordt niet helemaal roze.

Mogelijk hebt u niet genoeg urine gebruikt. Als de controlelijn binnen 10 minuten na het testen verschijnt, kunt u er echter zeker van zijn dat de test heeft gewerkt.

Binnen 10 minuten na het testen verschijnt er geen blauwe lijn in het controlevenster.

De test heeft niet gewerkt, mogelijk omdat er te veel of te weinig urine is gebruikt. Test opnieuw met een nieuwe test, waarbij u de instructies nauwkeurig opvolgt.

Resultaatvenster

Controlevenster



www.clearblue.com

Onze adviseurs zijn aanwezig van ma t/m vrij van 8-16 uur, behalve op feestdagen.

NL 0800 394 9031 • BE 0800 815 46 Oproepen zijn gratis. Telefoongesprekken worden voor kwaliteitsdoeleinden opengevoerd en afgeluisterd. Houd het product en de verpakking alstublieft, inclusief eventuele folieverpakkingen, bij de hand wanneer u belt. Als onze Nederlandstalige medewerker niet beschikbaar is, helpt ons Engelstalige team u graag verder.

Instructies voor Clearblue Ultravroeg, met 'CB14' gedrukt op de wikkel. Voor thuis zelf testen. Enkel voor *in vitro* diagnostisch gebruik. Niet voor inwendig gebruik. Niet hergebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren tussen 2 °C en 30 °C. Als u het product in de koelkast bewaart, moet u het vóór gebruik gedurende 30 minuten op kamertemperatuur laten komen. Niet gebruiken als de folieverpakking beschadigd is. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum. Gooi het product weg bij het gewone huishoudelijke afval. Haal het product niet uit elkaar.

Bevat kleine onderdelen. Geen onderdelen van dit apparaat openen. Zoek medische hulp als u delen van dit apparaat per ongeluk inslikt. Maak bij Clearblue melding van letsel dat wordt veroorzaakt door het gebruik van dit product.

179% van de uitslagen 'Zwanger' kunnen 6 dagen vóór uw gemiste menstruatie worden gedetecteerd (5 dagen voordat uw menstruatie zou moeten beginnen).

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Zwitserland.

LOT	Batchcode	IVD	<i>In vitro</i> diagnostisch medisch hulpmiddel	Fabrikant
Uiterste gebruiksdatum	Temperatuurlimiet 2 °C - 30 °C	Niet opnieuw gebruiken		

Clearblue is een handelsmerk van SPD.
© 2021 SPD. Alle rechten voorbehouden.

2300471.05 03-2021

